


CITOLOGINĖS ŠEPETINIŲ BIOPSIJŲ, ATSPAUDŲ IR NUOGRANDŲ MEDŽIAGOS (NEGINEKOLOGINĖS) SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA V 1.00

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠIMAS, FIKSAVIMAS

Instrukcija taikytina bronchoskopijų, endoskopijų metu šepetėliu paimtiems ėminiams ar paimtų biopstatų atspaudų ant objekcinio stiklelio paruošimui, taip pat odos nuograndų citologiniam tyrimui.

- Paženklintas objekcinis stiklelis (-iai) ir /ar transportinės terpės konteineris (-iai):
 - paprastu pieštuku objekcinio stiklelio šlifuojuose dalyje užrašoma paciento pavardė, vardas, arba
 - užklijuojamas stiklelio šlifuojuose dalyje sukurtas lipdukas su unikaliu bar kodu ir paciento vardu, pavarde;
 - ant transportinės terpės konteinerio (-ių) užklijuojama etiketė su paciento vardu, pavarde
- Siunčiant tyrimui kelis to paties paciento mėginius (kai svarbu gauti atskirą patologijos išvadą), naudojami atskiri objekciniai stikleliai ar skystos transportinės terpės, kurios sunumeruojamos ir aprašomos siuntimo tirti blanku.
- Infekuota TB/ŽIV/HCV/HBC ar kt. infekcinių ligų sukėlėjais tiriamoji medžiaga siunčiama pažymėta specialia žyma „**INFEKCIJOS PAVOJUS!**“, kuria ženklintas siuntimo tirti blankas.
- Svarbu:**
 - Tiriamojame vietoje nuvalyti gleives, nekrozę, uždegimo eksudato perteklių.
 - Tiriamojame vietoje nenaudoti anestezijos ar skysčio, kurie gali sukelti ląstelių lizę.
 - Paimti medžiagą nuo pakitusios vietos.
- Paimta medžiaga nuo instrumento abiejų pusių (šepetėlio, skalpelio) piešiamuoju judesiu, plonu sluoksniu paskleidžiama ant objekcinio stiklelio ir nedelsiant fiksuojama arba kruopščiai nuskalaujama skystoje transportinėje terpėje (naudoti šią terpę ypatingai rekomenduojama šepetinėms biopsijoms):

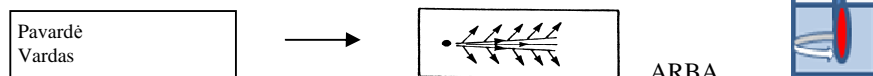

- Biopsijos metu gautas audinio gabalėlis iš skirtingų pusių lengvai priglaudžiamas ir atspaudžiamas prie paženklinto objekcinio stiklelio.
- FIKSAVIMAS.** Ėminiai ant objekcinių stiklelių fiksuojami vienu iš šių metodų:
 - aeroliniu (komerciniu) fiksatoriumi – purškama iš 25-30 cm atstumo (2-3 paspaudimai).
 - 10-15 min. tepinėlis merkiamas į 96° etilo alkoholį.Jeigu medžiaga paskleidžiama ant kelių stiklelių, tai fiksuojamas kiekvienas stiklelis po kiekvieno medžiagos paskleidimo.
Naudojant skystą transportinę terpę, rekomenduojama naudoti:
 - Skystą terpę *BD CytoRich RED* plonasluoksnei citologijai (terpės privalumai: lizuoja eritrocitus, koncentruoja ląsteles, ženkliai mažėja neinformatyvių tyrimų), arba
 - Saccomano tirpalą (alternatyvi skysta terpė citologiniam tyrimui). Terpių galima gauti Centro laboratorijoje (tel.: 2477351).
- Galima ėminio ant objekcinio stiklelio nefiksuoti, leisti išdžiūti ore (svarbu pažymėti, kad nefiksuota).

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS

6. Siunčiant į Centrą tiriamąją medžiagą patologijos tyrimui, pildoma [elektroninė siuntimo forma](#), atitinkanti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą siuntimo tirti formą (SAM Forma Nr.014-1-1/a, 2014 12 23 d.). Užpildyta elektroninė siuntimo forma atspausdinama, pasirašoma ir kartu su tiriamąja medžiaga siunčiama tyrimui. Tiriamosios medžiagos siuntėjas turi galimybę savarankiškai stebėti tyrimo Centre eigą (išsamesnė informacija tel.: 2 72 06 64 ar elektroniniu paštu: tyrimai@vpc.lt). Taip pat išlieka galimybė medžiagą patologijos tyrimui siųsti užpildžius popierinę siuntimo tirti formą.

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS

Siunčiama tiriamoji medžiaga Valstybiniame patologijos centre priimama pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., šeštadieniais – nuo 8 iki 13 val. adresu [P. Baublio 5, Vilnius](#).

BENDRIEJI SIUNTIMO TIRTI PILDYMO REIKALAVIMAI.

Siuntime pažymėti:

1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Siunčiančią įstaigą, gydytoją, jo kontaktus.
3. Naudojamą fiksuojamą būdą, medžiagą arba informaciją, kad medžiaga nefiksuota.
4. Klinikinius ligos duomenis.

INFORMACIJA TEIKIAMA:

el. paštu: info@vpc.lt arba Centro telefonais:
8 5 2477351 (Tiriamosios medžiagos priėmimas);
8 5 2477350 (Informacija).

El. paštu: kokybe@vpc.lt prašome teikti pastabas apie tyrimų kokybę.