

ŠLAPIMO TAKŲ IR INKSTŲ NAVIKŲ, CISTŲ SKYSČIO SURINKIMO IR SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA V 1.00

Citologiškai tirama:

- šlapimo pūslės šlapimas, kateterizuotas šlapimas, ploviniai, ir viršutinių šlapimo takų šepetinės biopsijos ir ploviniai.
- inkstų cistų turinys.

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PAĖMIMAS:

Šlapimo takų skysčio surinkimas:

1. Įprasto šlapimo 25-100 ml švariame inde pristatoma į laboratoriją per 3-4 val.
2. Netinka rytinis šlapimas.
3. Šlapimo takų nuoplovos renkamos plaunant šlapimo takus 50 ml fiziologiniu tirpalu prieš biopsiją.
4. Šlapimo takų nuoplovos siunčiamos nedelsiant. Jei siuntimas užtruks ilgiau nei 12 val. – mėinys laikomas +4°C; jei ilgiau nei 24 val. fiksuojama specialioje terpėje (BD CytoRich BLUE arba RED ar Saccomano tirpale).

Inksto navikų ar cistų turinio surinkimas:


1. Žymimas fiksuojančios transportinės terpės konteineris (etiketėje nurodomas paciento vardas, pavardė) ir objektinis stiklis (nurodomas paciento vardas, pavardė).
2. Vienas lašas aspiruoto inksto naviko mėginio perkeliamas ant žymėto objektinio stiklelio, paruošiamas įprastinis ore džiovintas tepinėlis.
3. Likusi aspiruota naviko medžiaga perkeliama iš švirkšto į fiksuojančią transportinę terpę žymėtame konteineryje:
 - 3.1. švirkštu (kuriuo aspiruotas mėginys) iš konteinerio įtraukiama lašteles fiksuojančios transportinės terpės;
 - 3.2. švirkšte susimaišiusi medžiaga išpurškiama atgal į transportinį konteinerį („švirkšto praplovimas“).
4. Inksto cistos turinys gali būti siunčiamas nedelsiant arba fiksuojamas transportinėje terpėje.

SVARBU: tiriamosios citologinės medžiagos fiksavimui bei transportavimui naudoti tinkamą patologijos tyrimui fiksuojančią terpę. Rekomenduojama naudoti:

- Skystą terpę BD CytoRich RED plonasluoksnei citologijai (terpės privalumai: lizuoja eritrocitus, koncentruoja lašteles, ženkliai mažėja neinformatyvių tyrimų). Terpių galima gauti Valstybinio patologijos centro laboratorijoje.

- Saccomano tirpalą (alternatyvi skysta terpė citologiniams tyrimams). Terpių galima gauti Valstybinio patologijos centro laboratorijoje.

Pastaba: pasirenkant kitas terpes, būtina pasitarti su laboratorija – terpės turi būti suderinamos su laboratorijoje naudojamomis technologijomis.

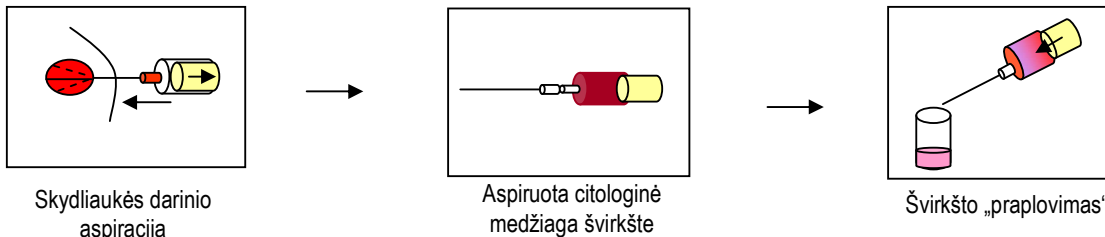

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS:

Siunčiant į Centrą tiriamąją medžiagą patologijos tyrimui, pildoma [elektroninė siuntimo forma](#), atitinkanti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą siuntimo tirti formą (SAM Forma Nr.014-1-1/a, 2014-12-23 d.). Užpildyta elektroninė siuntimo forma atspausdinama, pasirašoma ir kartu su citologine medžiaga siunčiama tyrimui. Taip pat išlieka galimybė medžiagą patologijos tyrimui siųsti užpildžius įprastą siuntimo tirti blanko formą.

TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS

Tiriamoji medžiaga Valstybiniame patologijos centre priimama pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., šeštadieniais – nuo 8 iki 13 val. adresu [P. Baublio 5, Vilnius](#).

BENDRIEJI SIUNTIMO TIRTI PILDYMO REIKALAVIMAI

Siuntime pažymėti:

1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Siunčiančią įstaigą, gydytoją, jo kontaktus.
3. Naudojamą mėginio fiksuojamą būdą, medžiagą arba informaciją, kad medžiaga nefiksuota.
4. Klinikinius ligos duomenis.

INFORMACIJA TEIKIAMA:

el. paštu: info@vpc.lt arba Centro telefonais:
 8 5 2477351 (Tiriamosios medžiagos priėmimas);
 8 5 2477350 (Informacija).

El. paštu: kokybe@vpc.lt prašome teikti pastabas apie tyrimų kokybę